




Tinció gram

■ Cristall violeta

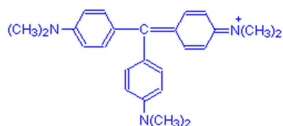

Tipus de tinció: bàsic

Color : violat

Ús:

Tenyeix la mureïna de color violat. Utilitzat per tenyir la paret bacteriana. Utilitzat en la tinció Gram per diferenciar la tipologia dels bacteris.

Preparació:

Cristall violeta	0,5 g
Aigua destil·lada	100 ml

Protocol Gram:

Un cop fixada la mostra a la flama, cobrir amb el colorant 1 minut. Rentar amb aigua. Afegir lugol durant 1 minut. Rentar i retirar l'aigua en excés. Decolorar amb unes gotes d'alcohol-acetona (5:3) amb el porta inclinat, de manera que vagi baixant. Rentar amb aigua passats 5 minuts. Afegir colorant de contrast (fucsina) durant 1 minut. Rentar amb aigua. Eixugar.